


Delta Tips

NMDT_0011

多核NMRテーブルを表示する


NMR data processing software

Delta
NMR Software
v5.0

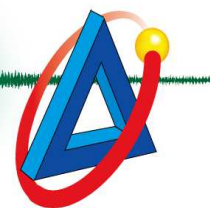

< いつでも確認できるから便利です！ >

Deltaウィンドウや1Dプロセッサなどの [補助ツール] メニューで [周期律表] を選びます。

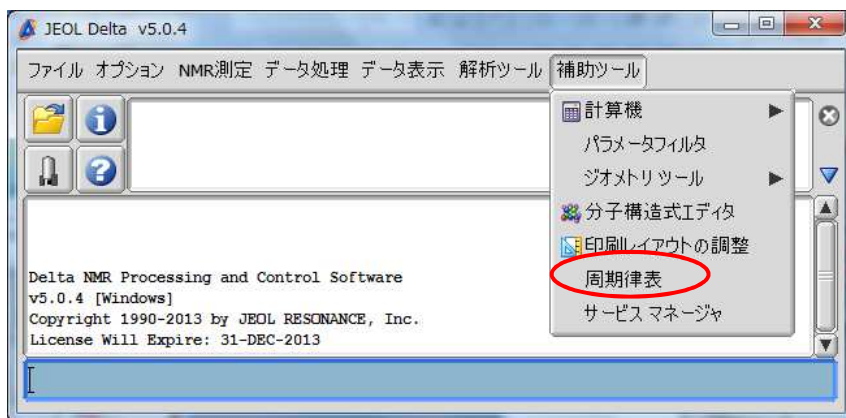

① ¹Hの共鳴周波数を指定する。

② 核種を選択する。

⇒ 天然存在比, 核スピ, 共鳴周波数および相対感度が表示されます。

| 同位体 | 天然存在比 | Spin | 共鳴周波数 | Rel. 1H | Rel. 13C |
|-----------------|-------|------|--------|---------|----------|
| ¹⁴ N | 99.63 | +1 | 28.904 | 0.00101 | 5.69 |
| ¹⁵ N | 0.37 | -1/2 | 40.544 | 0.00104 | 0.0219 |